




wasserlab

ECOMATIC de 3 a 10 l/h

AGUA TIPO II


AGUA OSMOTIZADA

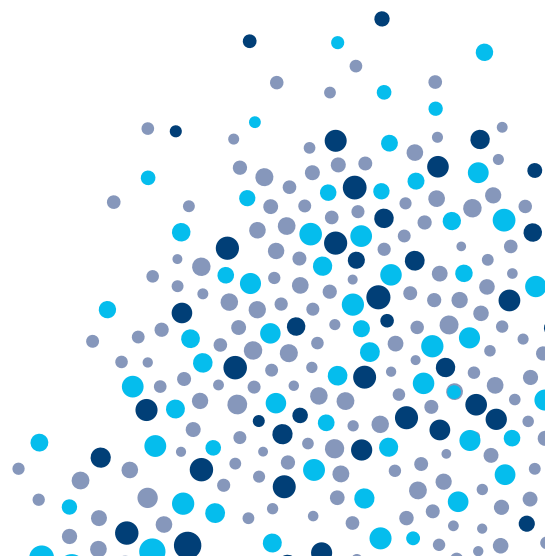

ECOMATIC

AGUA TIPO II

“Agua siempre recién producida,
de calidad constante y monitorizada”

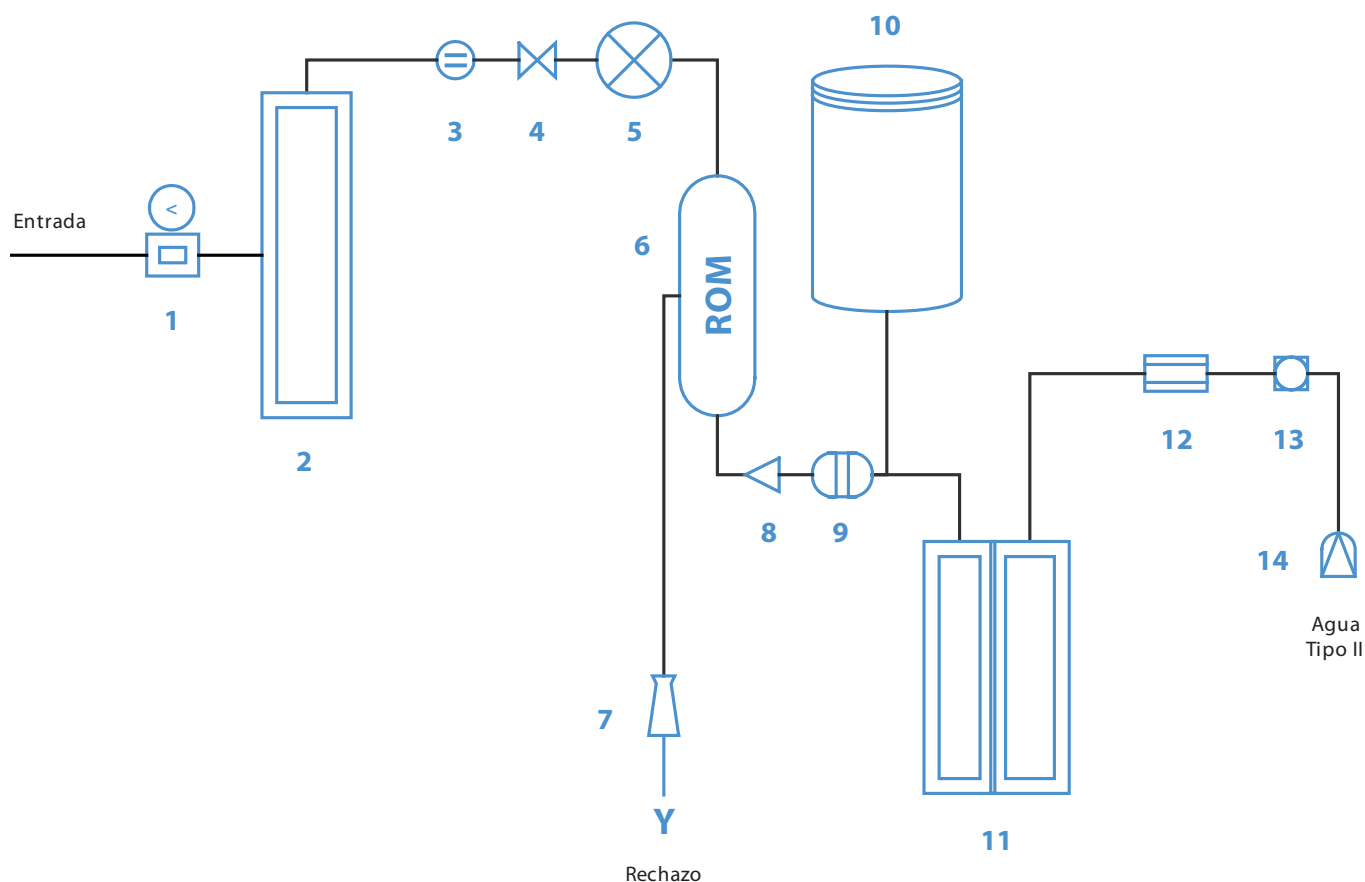

El Equipo Ecomatic
dispensa siempre Agua
Tipo II recién purificada

- 1 Regulador de presión y Manómetro. 2 Módulo de Pretratamiento. 3 Presostato. 4 Electroválvula. 5 Bomba. 6 Módulo de Ósmosis inversa. 7 Regulador de caudal. 8 Válvula anti-retorno. 9 Presostato. 10 Depósito presurizado de agua osmotizada. 11 Módulo de Desionización. 12 Célula de conductividad. 13 Detector de flujo. 14 Grifo de dispensación.

Ecomatic: Equipo compacto de purificación de agua que produce Agua Tipo II (ASTM*, Grado Analítico) partiendo directamente del agua de la red

* American Society for Testing and Materials



El Ecomatic proporciona Agua Tipo II (Grado Analítico), con producciones desde 3 l/h hasta 10 l/h, según modelo

La combinación de sistemas de purificación mediante ósmosis inversa y desionización proporciona agua purificada de calidad constante a un precio muy competitivo.

El equipo **dispensa siempre Agua Tipo II recién producida**, evitando su deterioro por almacenamiento.

Control continuo del proceso de purificación mediante microprocesador

Una pantalla digital de fácil lectura, informa al usuario, en todo momento, de:

- La calidad del agua producida medida en $\mu\text{S}/\text{cm}$, con una resolución de $\pm 0,1 \mu\text{S}/\text{cm}$.
- Del estado del proceso de purificación (en producción, depósito lleno, equipo en dispensación) y avisos, mediante símbolos de muy fácil interpretación.

Aplicaciones

Más del 90% de los ensayos generales de laboratorio, precisan Agua Tipo II:

- Preparación de medios de cultivo
- Preparación de reactivos y soluciones tampón
- Limpieza de material
- Análisis Clínicos
- Cámaras de Niebla Salina y Cámaras Climáticas
- Alimentación de equipos de producción de Agua tipo I (Ultrapura)
- El Ecomatic puede proporcionar también Agua Tipo III (Agua Osmotizada) para termodesinfectadoras y Autoclaves.

Funcionamiento totalmente automático para la máxima tranquilidad del usuario.

Parámetros de **consignas de aviso programables** a voluntad.

Simplicidad de manejo

Fácil instalación. Mantenimiento sencillo y rápido, gracias a su sistema de cartuchos intercambiables, mediante conexiones rápidas.



Monitorización Agua Tipo II



Wasserlab

Water Purification Systems

Wasserlab®

Somos fabricantes de **equipos de purificación de agua** con una amplia trayectoria en la instalación de soluciones en **múltiples sectores**.

Ofrecemos **asesoramiento personalizado** en la selección de equipos y proporcionamos **soporte técnico integral** para garantizar su óptimo funcionamiento.

Pol. Ind. Comarca II Calle E, Nº 3. 31191 Barbatáin - Navarra (España)

T. +34 948 186 141 · info@wasserlab.com

www.wasserlab.com

